

premium
plus™

produkty do profilaktyki

najbogatsza oferta gumek, szczoteczek i końcówek
do profilaktyki dostępna na rynku



trzonki

Krótki przewodnik po dostępnych rodzajach mocowań, ich zaletach oraz rodzajach kompatybilnych kątnic.



kszałty

Wszystkie kształty gumek dostępne są w trzech stopniach twardości: regular, soft i extra soft.



GUMKI PROPHY Z ŻEBERKAMI I BLASZKAMI

Zaprojektowane z 4 blaszkami i wewnętrznymi żebkami, aby dostarczać optymalną ilość pasty do polerowania. Zdolność „rozszerzania się” pod naciskiem pozwala dotrzeć w obszary międzyzębowe oraz poddziąsłowe.

Nie zawierają lateksu oraz BPA

KRÓTKIE GUMKI PROPHY Z ŻEBERKAMI I BLASZKAMI

Posiadają wszystkie zalety standardowych gumek prophy. Ich zmniejszona długość o 1.5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp w jamie ustnej pacjenta. W połączeniu z krótkim trzonkiem i kątnicą typu Mini-Head całkowity rozmiar gumki prophy i główki kątnicy zostaje zmniejszony o ponad 30%. Szczególnie skuteczne w leczeniu pacjentów z ograniczonym dostępem w jamie ustnej lub w trakcie zabiegów z pacjentami wrażliwymi na odruch wymiotny.

Nie zawierają lateksu oraz BPA

GUMKI PROPHY ZE SPIRALNYMI BLASZKAMI

Zaprojektowane z romboidalnymi wypukłościami na zewnętrznej powierzchni, aby zoptymalizować polerowanie przestrzeni międzyzębowych i usuwanie płytki nazębnej. Ten rodzaj gumek prophy wymaga mniejszego nacisku, co zmniejsza zmęczenie użytkownika i ułatwia pracę. Spiralne blaszki utrzymują pastę wewnątrz, redukując rozpryski i umożliwiając gumce rozszerzanie się.

Nie zawierają lateksu oraz BPA

kolory

Bogata gama kolorów ułatwia identyfikację stopni twardości, dodając również koloru do gabinetu stomatologicznego.

Nasze gumki prophy są dostępne w opakowaniach zarówno z jednokolorowymi wersjami, jak i z różnorodnym asortymentem kolorów.



Biały



Jasnoniebieski



Pomarańczowy



Fioletowy

TWARDOŚĆ REGULAR



Różowy



Limonkowy



Zielony



Ciemnoniebieski

TWARDOŚĆ SOFT



Żółty



Czerwony


TWARDOŚĆ EXTRA SOFT



KRÓTKIE GUMKI PROPHY ZE SPIRALNYMI BLASZKAMI

Posiadają wszystkie zalety standardowych gumek prophy. Dodatkowe wypukłości na zewnętrznej stronie pomagają w polerowaniu przestrzeni międzyzębowych. Ich zmniejszona długość o 1.5 mm zapewni łatwiejszy dostęp w jamie ustnej pacjenta. W połączeniu z krótkim trzonkiem i kątnicą typu Mini-Head całkowity rozmiar gumki prophy i główki kątnicy zostaje zmniejszony o ponad 30%. Szczególnie skuteczne w leczeniu pacjentów z ograniczonym dostępem w jamie ustnej lub w trakcie zabiegów z pacjentami wrażliwymi na odruch wymiotny.


Nie zawierają lateksu oraz BPA

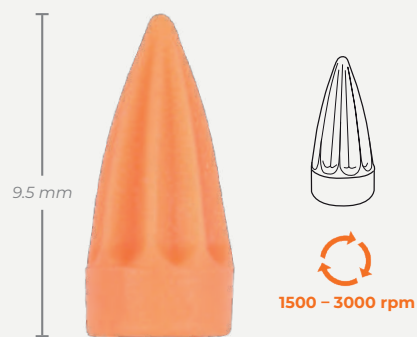

GUMKI PROPHY STOŻKI

Zaprojektowane z myślą o dostępie do trudno dostępnych miejsc. Idealne podczas leczenia ortodontycznego lub procedur periodontologicznych, gdzie ich elastyczność zapewnia najskuteczniejsze polerowanie. Karbowane żeberka i ich krawędzie oferują skuteczne czyszczenie i polerowanie powierzchni zębów.


Nie zawierają lateksu oraz BPA

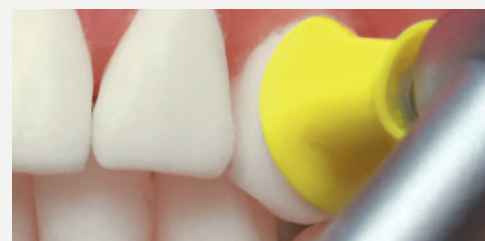

Nasze gumki prophy rozszerzają się pod naciskiem zapewniając dostęp do przestrzeni międzyzębowych oraz obszarów poddziąsłowych.



Romboidalne wypukłości pomagają podczas polerowania przestrzeni międzyzębowych oraz obszarów poddziąsłowych.

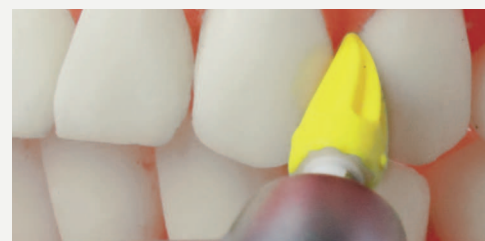

Gumki prophy w kształcie stożka pozwalają dotrzeć w trudno dostępne miejsca.



Świetnie nadają się do pracy z aparatami ortodontycznymi.

trzonki

Krótki przewódnik po dostępnych rodzajach mocowań, ich zaletach oraz rodzajach kompatybilnych kątnic.



CA/RA Metalowy Trzonek
Najpopularniejsze mocowanie do standardowych kątnic.



CA/RA Krótki Metalowy Trzonek
Skrócona długość trzonka ułatwia pracę w trudnych obszarach. Wymagana kątnica typu Mini-Head.



WKREĆANY Trzonek
Minimalizuje vibracje podczas ruchu obrotowego. Wymagana kątnica typu Screw-in.



Adapter do systemu Snap-On nie jest dostarczany ze szczoteczkami

SYSTEM SNAP-ON
Brak trzonka sprawia, że ten system mocowania jest najtańszy w użytku oraz najbardziej przyjazny środowisku. System Snap On dostępny jest jedynie dla wariantów szczoteczki płaskich i stożkowych.

kszałty

Dostępne kształty pozwalają dobrać najlepszy produkt do danych procedur.



1500 – 3000 rpm

KIELICH STANDARD 9MM

Nasza standardowa szczoteczka z nylonowym włosiem o klasycznym kształcie. Idealna do polerowania zębów, wypełnień, w tym złotych i amalgamatowych.

Nie zawierają lateksu oraz BPA



1500 – 3000 rpm

KIELICH MINI 7MM

Mniejsza wersja naszego popularnego kielicha. Posiada wszystkie zalety standardowego kielicha, a ponadto mniejszy rozmiar ułatwia dostęp do trudnych obszarów w jamie ustnej.

Nie zawierają lateksu oraz BPA



1500 – 3000 rpm

SZCZOTECZKA MIKRO

Nasze szczoteczki mikro zostały zaprojektowane z myślą o dotarciu do miejsc o ograniczonym dostępie. Nylonowe włosie idealnie nadaje się do polerowania w okolicach aparatów ortodontycznych, przestrzeni międzyzębowych, implantów i ubytków.

Nie zawierają lateksu oraz BPA

kolory

Bogata gama kolorów ułatwia identyfikację stopni twardości, dodając również koloru do gabinetu stomatologicznego.

Nasze szczoteczki prophy są dostępne zarówno w jednokolorowych wersjach, jak i w wariantach z asortymentem kolorów.



Biały

Jasnoniebieski

Pomarańczowy

Fioletowy

Przezroczysty

Różowy

Limonkowy

Zielony

Ciemnoniebieski

Żółty

Czerwony

TWARDOŚĆ REGULAR

Kolor biały dostępny wyłącznie w opakowaniach jednokolorowych.
Kolory: jasnoniebieski, pomarańczowy i fioletowy dostępne są tylko w asortymencie kolorów.

TWARDOŚĆ SOFT

Kolor przezroczysty dostępny wyłącznie w opakowaniach jednokolorowych.
Kolory: różowy, limonkowy, zielony i ciemnoniebieski dostępne są tylko w asortymencie kolorów.

TWARDOŚĆ EXTRA SOFT



SZCZOTECZKA PŁASKA

Nasza płaska szczoteczka zapewnia większy zasięg przy polerowaniu zębów, wypełnień, w tym złotych i amalgamatowych.


Nie zawierają lateksu oraz BPA




SZCZOTECZKA STOŻKOWA

Szczoteczka stożkowa zapewnia większy zasięg i możliwość precyzyjnego punktowego polerowania delikatnych obszarów implantów i aparatów ortodontycznych.


Nie zawierają lateksu oraz BPA

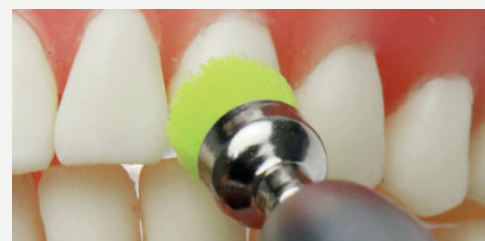


Szczoteczki w kształcie kielich standard i mini świetnie nadają się do polerowania zębów i wypełnień.

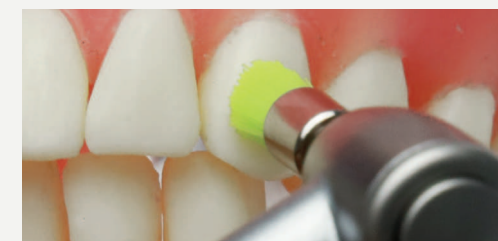

Płaska szczoteczka z łatwością dociera do powierzchni z ograniczonym dostępem oraz do przestrzeni międzyzębowych.

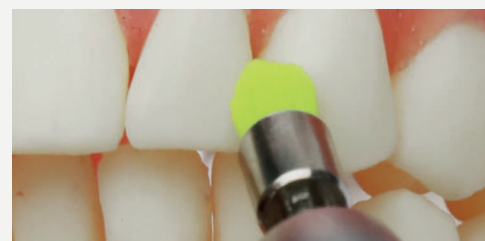

Stożkowa szczoteczka jest idealna do polerowania przestrzeni międzyzębowych.

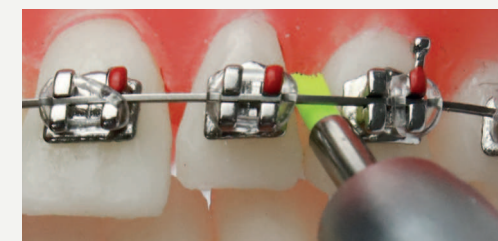

Szczoteczka mikro została zaprojektowana z myślą o dostępie do małych, trudno dostępnych obszarów wymagających precyzji.

dlaczego końcówki prophy angle?

Końcówki prophy angle pasują do większości standardowych prostnic, co eliminuje potrzebę posiadania drogiego, specjalnie zaprojektowanego sprzętu. Są one pakowane pojedynczo, a ich konstrukcja zapobiega konieczności demontażu rękojeści w celu wyczyszczenia wewnętrznego mechanizmu i przekładni po użyciu. Końcówki prophy angle pozwalają oszczędzić czas, a to oznacza oszczędność pieniędzy.

rotacja 360° a ruch recyprokalny 60°

Nasze standardowe końcówki prophy angle obracają się o 360°, zapewniając wydajne, ekonomiczne i bezpieczne polerowanie. Nasze głowice poruszające się ruchem recyprokalnym 60° przenoszą wydajność na wyższy poziom. Nie wytwarzają ciepła i dlatego można je stosować w sposób ciągły, oszczędzając czas i pieniądze. Nie powstają rozpryski śliny, krwi ani pasty profilaktycznej, a brak ruchu obrotowego zmniejsza ryzyko uszkodzenia dziąseł lub tkanki miękkiej.



kąt nachylenia 90° a 105°

Końcówki prophy angles naszej marki dostępne są w dwóch różnych wariantach nachylenia: 90° lub 105°. Oba warianty zostały ergonomicznie zaprojektowane, aby zapewnić komfort użytkownika. Końcówki posiadają również precyzyjnie wykonaną przekładnię, która zapobiega wibracjom.



prophy angles recyprokalne 60°

Prophy angles z gumkami dostępne są w pojedynczych kolorach lub asortymencie kolorów.

Prophy angles ze szczoteczkami dostępne są w opakowaniach w pojedynczych kolorach w wariantach: biały (regular), przezroczysty (soft) lub żółty (extra soft). Pozostałe kolory dostępne są jedynie w opakowaniach z asortymentem kolorów.

GUMKI PROPHY ZE SPIRALNYMI BLASZKAMI	KRÓTKIE GUMKI PROPHY ZE SPIRALNYMI BLASZKAMI	SZCZOTECZKA PŁASKA	SZCZOTECZKA STOŻKOWA	KIELICH MINI 7MM
90° 1500 – 3000 rpm	90° 1500 – 3000 rpm	90° 1500 – 3000 rpm	90° 1500 – 3000 rpm	90° 1500 – 3000 rpm
Zaprojektowane z romboidalnymi wypukłościami na zewnętrznej powierzchni, aby zoptymalizować polerowanie przestrzeni międzyzębowych i usuwanie płytki nazębnej. Ten rodzaj gumek prophy wymaga mniejszego nacisku, co zmniejsza zmęczenie użytkownika i ułatwia pracę. Spiralne blaszki utrzymują pastę wewnątrz, redukując rozpryski i umożliwiając gumce rozszerzanie się.	Posiadają wszystkie zalety naszych gumek prophy ze spiralnymi blaszkami. Ich zmniejszona długość o 1,5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp w jamie ustnej pacjenta.	Nasza płaska szczoteczka zapewnia większy zasięg przy polerowaniu zębów i wypełnień.	Szczoteczka stożkowa zapewnia większy zasięg i możliwość precyzyjnego punktowego polerowania delikatnych obszarów implantów i aparatów ortodontycznych.	Nasza standardowa szczoteczka z nylonowym włosiem o klasycznym kształcie. Idealna do polerowania zębów, wypełnień, w tym złotych i amalgamatowych.
REGULAR SOFT EXTRA SOFT				
Biały Jasnoniebieski Pomarańczowy Fioletowy Przezroczysty Różowy Limonkowy Zielony Ciemnoniebieski Żółty Czerwony				

prophy angles obrotowe 360° przezroczyste

Najpopularniejsze warianty w naszej ofercie.

GUMKI PROPHY Z ŻEBERKAMI I BLASZKAMI



Dostarczają optymalną ilość pasty do polerowania. Zdolność „rozszerzania się” pod naciskiem pozwala dotrzeć w obszary międzyzębowe oraz poddziąsłowe.

KRÓTKIE GUMKI PROPHY Z ŻEBERKAMI I BLASZKAMI



Posiadają wszystkie zalety naszych standardowych gumek prophy. Ich zmniejszona długość o 1.5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp w jamie ustnej pacjenta.

KRÓTKIE GUMKI PROPHY ZE SPIRALNYMI BLASZKAMI



Posiadają wszystkie zalety naszych gumek prophy ze spiralnymi blaszkami. Ich zmniejszona długość o 1.5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp w jamie ustnej pacjenta.

REGULAR



Jasnoniebieski Fioletowy

SOFT



Zielony Różowy

prophy angles obrotowe 360° standard

Ekonomiczne wersje najpopularniejszych wariantów. Proste i efektywne.

GUMKI PROPHY Z ŻEBERKAMI I BLASZKAMI



Dostarczają optymalną ilość pasty do polerowania. Zdolność „rozszerzania się” pod naciskiem pozwala dotrzeć w obszary międzyzębowe oraz poddziąsłowe.

SZCZOTECZKA PŁASKA



Nasza płaska szczoteczka zapewnia większy zasięg przy polerowaniu zębów i wypełnień. Dostępne jedynie w twardości regular, w kolorze białym.

SZCZOTECZKA STOŻKOWA



Szczoteczka stożkowa zapewnia większy zasięg i możliwość precyzyjnego punktowego polerowania delikatnych obszarów implantów i aparatów ortodontycznych. Dostępne jedynie w twardości regular, w kolorze białym.

REGULAR




Fioletowy Biały

SOFT



Zielony

jaka prostnica
jest kompatybilna
z naszymi
końcówkami
prophy angle?

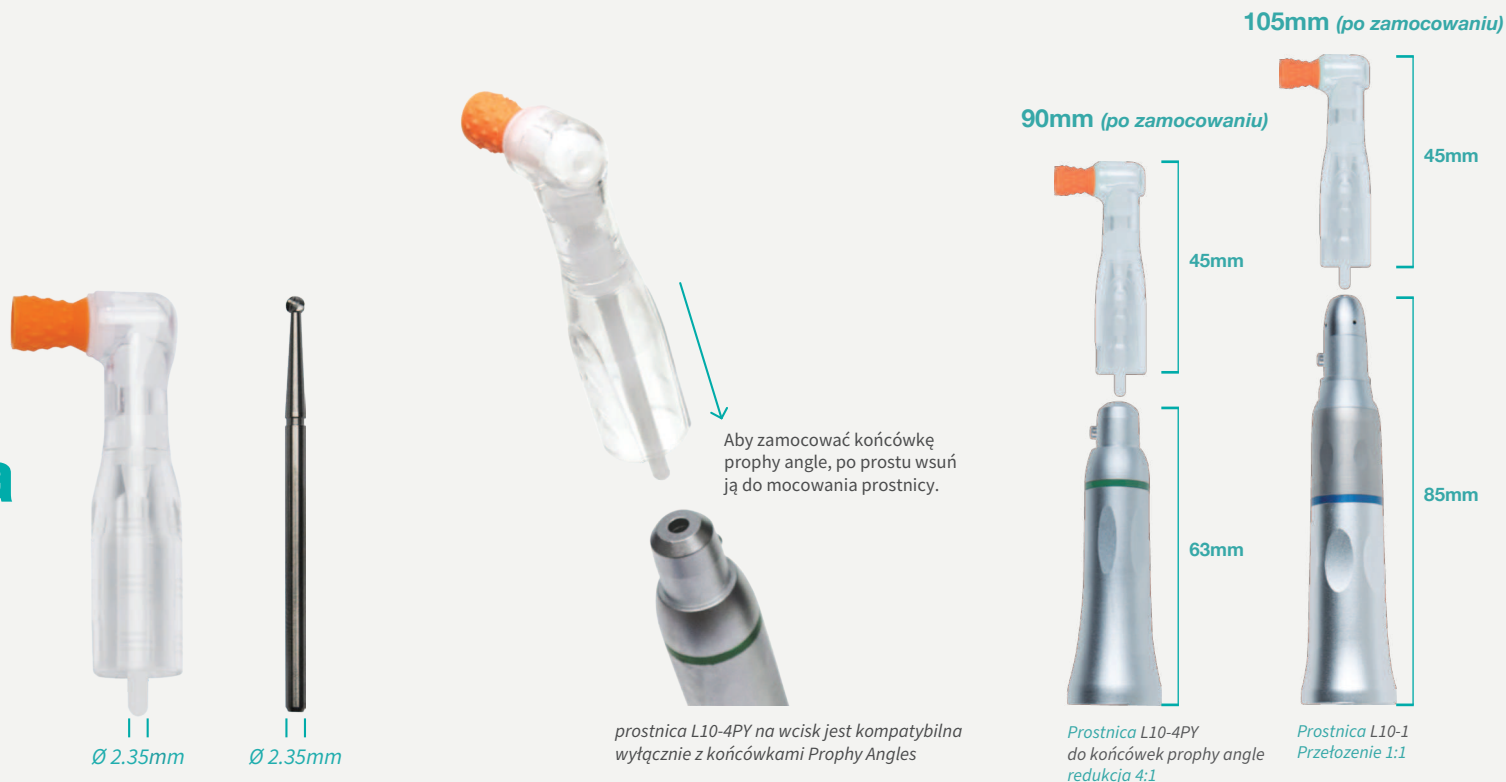

trzonki

Trzonki naszych końcówek prophy angles mają taką samą średnicę jak wiertło HP, pasują do mocowania standardowej prostnicy.

Należy stosować prawidłową prędkość obrotu (1500-3000 obr/min) podczas polerowania, aby uniknąć nadmiernych wibracji.

jak zamocować końcówkę prophy angle?

Końcówki prophy angles pasują do standardowych prostnic bez sprężyny wewnętrznej i podświetlenia. Nasza prostnica L10-4PY została zaprojektowana tak, aby doskonale współpracować z końcówkami prophy angles. Posiada mechanizm przekładni redukcyjnej 4:1, zapewniający zwiększony moment obrotowy co poprawia działanie i optymalną wydajność.

porównanie

Jak pokazuje powyższe porównanie, nasza standardowa prostnica L10-1 nadaje się do połączenia z końcówkami prophy angles, jednak nie posiada zalet modelu L10-4PY, który jest krótszy, lżejszy, a jego mechanizm przekładniowy 4:1 zapewnia wyższy moment obrotowy i poprawia kontrolę prędkości.

prostnice i kątnice

L20-1L

Standardowa główka, mocowanie na zatrzask, przełożenie **1:1**
Idealna do zastosowania w profilaktyce



NON OPTIC

NON OPTIC
DIRECT DRIVE

MODEL

L20 - 1L

RODZAJ TRZONKA Standard CA (Ø 2.35mm)

PRZEŁOŻENIE 1:1 Direct Drive

ZALECANA PRĘDKOŚĆ: 1,500 - 3,000 rpm

MAX. PRĘDKOŚĆ 24,000 rpm

OBRÓT 360°

MOCOWANIE Standard CA (RA, na zatrzask)

STANDARDOWY TRZONEK

Kątnica pasuje do wszystkich standardowych trzonków CA



L10-4PY

Prostnica do końcówek prophy angles, redukcja **4:1**
Zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych.



NON OPTIC

NON OPTIC
DIRECT DRIVE

MODEL

L10 - 4PY

RODZAJ TRZONKA Standard HP (Ø 2.35mm)

PRZEŁOŻENIE 4:1 Reduction

ZALECANA PRĘDKOŚĆ: 1,500 - 3,000 rpm

MAX. PRĘDKOŚĆ 6,000 rpm

OBRÓT 360°

MOCOWANIE HP, na wcisk - do użytku z naszymi końcówkami prophy angles

STANDARDOWY TRZONEK ISO HP

Prostnica pasuje do wszystkich końcówek prophy angle premium plus



L10-1

Standardowa prostnica, przełożenie **1:1**
Ekonomiczna, standardowe mocowanie na zacisk.



NON OPTIC

NON OPTIC
DIRECT DRIVE

MODEL

L10 - 1

RODZAJ TRZONKA Standard HP (Ø 2.35mm)

PRZEŁOŻENIE 1:1

ZALECANA PRĘDKOŚĆ: 1,500 - 3,000 rpm

MAX. PRĘDKOŚĆ 20,000 rpm

OBRÓT 360°

MOCOWANIE HP, na zacisk

STANDARDOWY TRZONEK ISO HP

Pasuje do naszych wszystkich końcówek prophy angles, nadaje się również do wszelkich wiertel, pilników i innych w standardzie HP.



premium
plus™

pasta polerska do profilaktyki

Łatwa w użyciu pasta do profilaktyki do czyszczenia i polerowania. Nadaje się również do stosowania przed fluoryzacją i po leczeniu odtwórczym.

- p66 średnioziarnista smak pomarańczowy
- opakowanie 100g
- tiksotropowa
- nie zawierająca fluoru
- orzeźwiający smak

ŚREDNIOZIARNISTA POMARAŃCZOWA



**DO WYCZERPANIA ZAPASÓW – NOWE
PASTY POLERSKIE DOSTĘPNE WKRÓTCÉ.**



standardowe opakowanie gumek i szczoteczek prophy

100 szt./opak.

100 opakowań w kartonie zbiorczym

Wymiary kartonów zbiorczych: max. 45 x 32 x 20cm

(dł x szer x wys)

Waga kartonu zbiorczego: max. 14.7 kg

CZĘŚĆ OFERTY GUMEK I SZCZOTECZEK PROPHY DOSTĘPNA JEST W OPAKOWANIACH 20 SZT.

GUMKI PROPHY METALOWY TRZONEK CA/RA SPIRALNE BLASZKI

SZCZOTECZKI PROPHY METALOWY TRZONEK CA/RA



gumki i szczoteczki prophy opakowanie 20 szt.

20 sztuk w woreczku, 50 woreczków w kartonie zbiorczym

w sprzedaży jedynie opakowania zbiorcze 50x20 szt.

Wymiary kartonu max. 30 x 24 x 4cm (dł x szer x wys)

Waga max. 1.6 kg



standardowe opakowanie końcówek prophy angles

100szt./opak.

20 opakowań w kartonie zbiorczym

Wymiary kartonu zbiorczego: max. 50 x 43 x 36 cm

(dł x szer x wys)

waga kartonu zbiorczego: max. 9.45 kg

produkcja marek własnych

Oferujemy możliwość tworzenia produktów pod Państwa własną marką, dostosowanych do konkretnych potrzeb i specyfikacji.

Niezależnie od tego, czy Państwa celem jest wzmocnienie tożsamości marki, rozszerzenie oferty produktowej, czy też zaoferowanie klientom ekskluzywnych produktów, nasz program produkcji marek własnych jest idealnym rozwiązaniem!

Nasz zespół ekspertów chętnie podzieli się wiedzą i doświadczeniem, oferując wsparcie na każdym etapie zamówienia. Pomagamy w kwestiach regulacyjnych, rozwoju produktu, projektowaniu i druku opakowań, a także organizacji transportu. Dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować Państwa wizję.

Aby wypromować swoją markę i wyróżnić się na tle konkurencji dzięki naszym usługom produkcji marek własnych, zachęcamy do kontaktu z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i tworzyć swoją unikalną linię produktów!





www.premiumpluspoland.com

European Office
Premium Plus Poland sp. z o. o.
Bukowska 27
62-081 Wysogotowo
Poland

+48 61 880 1094
info@premiumpluspl.com
www.premiumpluspoland.com

UK Office
Premium Plus UK Ltd.
2, Knighton Heath Industrial Estate
847 Ringwood Road, Bournemouth
Dorset BH11 8NE
U.K.

+44 1202 611 011
info@premiumplusuk.com
www.premiumplusuk.com

AUS Office
Premium Plus Australia Pty. Ltd.
98 Victoria Street,
Smithfield NSW 2164
Australia

+61 287 176 500
info@premiumplusau.com
www.premiumplusau.com

USA Office
Premium Plus Dental Supplies Inc.
155 Liberty Avenue
Brooklyn NY 11212
U.S.A.

+1 718 366 8686
sales@premiumplususa.com
<https://premiumplususa.com>

Japan Office
Premium Plus Japan Co., Ltd.
5th Floor, 1-1-31, Nishimidorigaoka,
Toyonakashi, Osaka 560-0005,
Japan

+81 6 6845 0066
premiumplus.info@premiumplus.jp
www.premiumplus.jp

Hong Kong Office
Premium Plus Medical Supplies Ltd.
1001, Yuen Long Trading Centre
No.33, Wang Yip Street West
Yuen Long, N.T.
Hong Kong

+852 2443 1219
hk@premiumplushk.com
www.premiumplushk.com

Manufacturing Facility
Premium Plus (Dongguan) Limited
Flat 101, No. 122, Tianqiao Road,
Changping, Dongguan,
Guangdong 523581
China

+86 769 83397277
info@premiumpluschina.com
www.premiumplushk.com